



# 2-Gallon Chemotherapy Container with Gasketed Lid and Screw-On Cap

Model 202

## ATTENTION

*Please review these instructions carefully before using this container.*

- For use in supervised and controlled areas
- Please check that container has not been damaged before placing into use.
- Never hold sharps container below recommended fill line.
- Examine autoclaved parts before handling.
- If container is dropped, inspect container for damage before handling.
- Do not fill sharps container above recommended fill line.
- For single use only. (X)
- Not made with natural rubber latex.
- Designed to comply with heavy metal limits as listed in RoHS/Directive on the Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (2002/95/EC).
- Safe for incineration.

## ATENCIÓN

*Favor de leer estas instrucciones cuidadosamente antes de usar este contenedor.*

- Para uso en áreas supervisadas y controladas
- Verifique que el contenedor no haya sido dañado antes de colocarlo para su uso.
- Nunca sostenga el contenedor de objetos punzocortantes por debajo de la línea de llenado recomendada.
- Examine las piezas autoclaveadas antes de manipularlas.
- Si se le cae el contenedor, inspecciónelo para ver si se dañó antes de manipularlo.
- No llene el contenedor para objetos punzocortantes por encima de la línea de llenado recomendada.
- Para un solo uso. (X)
- No fabricado con latex de caucho natura.
- Diseñado para cumplir con los límites de metales pesados enumerados en la RoHS/Directiva de Restricción del uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipo Eléctrico y Electrónico (2002/95/CE).
- Seguro para la incineración.


## ATTENTION

*Lire ces instructions attentivement avant d'utiliser ce contenant.*

- Doit être utilisé dans des zones supervisées et contrôlées
- Vérifier que ce contenant n'est pas endommagé avant d'en faire usage.
- Ne jamais tenir le contenant d'objets piquants et tranchants sous le repère de remplissage recommandé.
- Examiner les pièces stérilisées à l'autoclave avant de les manipuler.
- Si le contenant a été échappé par terre, vérifier qu'il n'a pas été endommagé avant de le manipuler.
- Ne pas remplir le contenant à déchets d'objets piquants et tranchants au-delà du repère de remplissage recommandé.
- À usage unique seulement. (X)
- Non fabriqué avec latex en caoutchouc naturel.
- Conçu pour se conformer aux limites de métaux lourds énumérés dans RoHS/Directive sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (2002/95/CE).
- Sûr pour l'incinération.



*See instructions for use on back.*

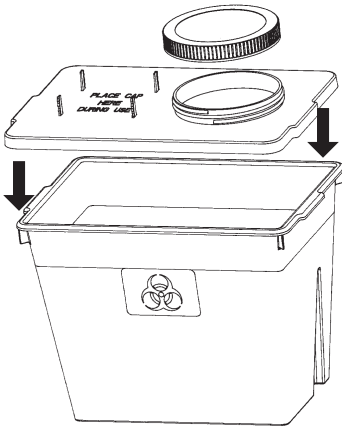

## 1. To assemble

- Set lid on base, lining up handles on both.
- Press lid firmly to base ensuring that three snaps in front and back, and two snaps on each side are firmly engaged.
- The parts will not snap together if not correctly aligned. Be sure handles on both lid and base meet.

## 2. To mount in bracket

- Mount on wall using wall mounting bracket #445 020. Gently slide container into bracket until it clicks.

## 3. To use

- With one hand, drop sharps into container. During use, the cap may be stored on the cap holder.
- Keep container closed when not in use.
- Check fill level regularly. Replace container when fill level is reached.

## 4. Final closure

- Screw lid on tightly for final disposal.
- To remove container from bracket, insert the bracket key into slots at bottom of unit, push up and release container from bracket.

## 5. Disposal

Chemotherapy container must be incinerated for final disposal.