

Two-Gallon Sharps Container

Model 102



*See instructions
for use on back.*

ATTENTION

Please review these instructions carefully before using this container.

- For use in supervised and controlled areas
- Please check that container has not been damaged before placing into use.
- Never hold sharps container below recommended fill line.
- Examine autoclaved parts before handling.
- If container is dropped, inspect container for damage before handling.
- Do not fill sharps container above recommended fill line.
- For single use only. (X)
- Not made with natural rubber latex.
- Designed to comply with heavy metal limits as listed in RoHS/Directive on the Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (2002/95/EC).
- Safe for incineration.

ATENCIÓN


Favor de leer estas instrucciones cuidadosamente antes de usar este contenedor.

- Para uso en áreas supervisadas y controladas
- Verifique que el contenedor no haya sido dañado antes de colocarlo para su uso.
- Nunca sostenga el contenedor de objetos punzocortantes por debajo de la línea de llenado recomendada.
- Examine las piezas autoclaveadas antes de manipularlas.
- Si se le cae el contenedor, inspecciónelo para ver si se dañó antes de manipularlo.
- No llene el contenedor para objetos punzocortantes por encima de la línea de llenado recomendada.
- Para un solo uso. (X)
- No fabricado con latex de caucho natura.
- Diseñado para cumplir con los límites de metales pesados enumerados en la RoHS/Directiva de Restricción del uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipo Eléctrico y Electrónico (2002/95/CE).
- Seguro para la incineración.

ATTENTION

Lire ces instructions attentivement avant d'utiliser ce contenant.

- Doit être utilisé dans des zones supervisées et contrôlées
- Vérifier que ce contenant n'est pas endommagé avant d'en faire usage.
- Ne jamais tenir le contenant d'objets piquants et tranchants sous le repère de remplissage recommandé.
- Examiner les pièces stérilisées à l'autoclave avant de les manipuler.
- Si le contenant a été échappé par terre, vérifier qu'il n'a pas été endommagé avant de le manipuler.
- Ne pas remplir le contenant à déchets d'objets piquants et tranchants au-delà du repère de remplissage recommandé.
- À usage unique seulement. (X)
- Non fabriqué avec latex en caoutchouc naturel.
- Conçu pour se conformer aux limites de métaux lourds énumérés dans RoHS/Directive sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (2002/95/CE).
- Sûr pour l'incinération.

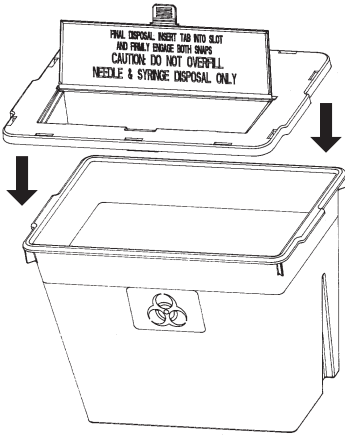

1. To assemble

- Align front of lid (lid opening) to front of base (biohazard label).
- Align tabs to slots in base. If they do not align, make sure lid and base are both facing forward.
- Press lid to base until all tabs snap into slots and are secure.

2. To mount in bracket

- Mount on wall using wall mounting bracket #445 020. Gently slide container into bracket until it clicks.

3. To use

- With one hand, drop syringe horizontally into opening.
- Check fill level regularly. Replace container when fill level is reached.

4. Temporary closure

Lid can be temporarily closed when not in use. With tab facing up, bring lid forward and press down on two front snaps. Use tab to reopen lid.

5. Final closure

- When full, bring lid forward and insert tab into slot. Press down on two front snaps to lock lid closed.
- To remove container from bracket, insert the bracket key into slots at bottom of unit, push up and release container.

6. Disposal

Dispose of container according to facility policy. May be autoclaved or incinerated.