

# 3-Gallon Sharps Container with Rotor Lid

Model 333



*See instructions  
for use on back.*

## **ATTENTION**

***Please review these instructions carefully  
before using this container.***

- Please check that container has not been damaged before placing into use.
- Never hold sharps container below recommended fill line.
- Examine autoclaved parts before handling.
- If container is dropped, inspect container for damage before handling.
- Do not fill sharps container above recommended fill line.
- For single use only. (X)
- Not made with natural rubber latex.
- Designed to comply with heavy metal limits as listed in RoHS/Directive on the Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (2002/95/EC).
- Safe for incineration.

## **ATENCIÓN**


***Favor de leer estas instrucciones cuidadosamente  
antes de usar este contenedor.***

- Verifique que el contenedor no haya sido dañado antes de colocarlo para su uso.
- Nunca sostenga el contenedor de objetos punzocortantes por debajo de la línea de llenado recomendada.
- Examine las piezas autoclaveadas antes de manipularlas.
- Si se le cae el contenedor, inspecciónelo para ver si se dañó antes de manipularlo.
- No llene el contenedor para objetos punzocortantes por encima de la línea de llenado recomendada.
- Para un solo uso. (X)
- No fabricado con latex de caucho natura.
- Diseñado para cumplir con los límites de metales pesados enumerados en la RoHS/Directiva de Restricción del uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipo Eléctrico y Electrónico (2002/95/CE).
- Seguro para la incineración.

## **ATTENTION**

***Lire ces instructions attentivement avant  
d'utiliser ce contenant.***

- Vérifier que ce contenant n'est pas endommagé avant d'en faire usage.
- Ne jamais tenir le contenant d'objets piquants et tranchants sous le repère de remplissage recommandé.
- Examiner les pièces stérilisées à l'autoclave avant de les manipuler.
- Si le contenant a été échappé par terre, vérifier qu'il n'a pas été endommagé avant de le manipuler.
- Ne pas remplir le contenant à déchets d'objets piquants et tranchants au-delà du repère de remplissage recommandé.
- À usage unique seulement. (X)
- Non fabriqué avec latex en caoutchouc naturel.
- Conçu pour se conformer aux limites de métaux lourds énumérés dans RoHS/Directive sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (2002/95/CE).
- Sûr pour l'incinération.

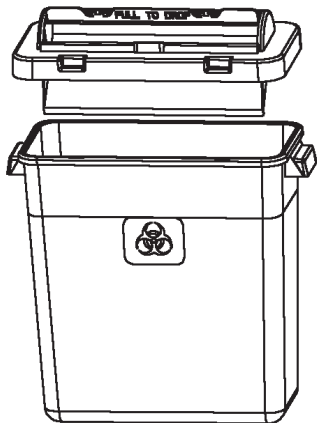

### 1. To assemble

- Align front of lid (lid opening) to front of base (biohazard label).
- Align tabs to holes in base. If they do not align, make sure lid and base are both facing forward.
- Press lid to base until all tabs snap into slots and are secure.

### 2. To mount in bracket

**NOTE:** This container must be wall-mounted during use.

- Mount on wall using wall mounting bracket #423 000 (non-locking) or #425 000 (locking). Gently slide container down into bracket.
- Can also be used with #1031 locking wall cabinet.

### 3. To use

- Place sharps horizontally into cradle opening. Pull cylinder forward if necessary to drop sharps into container.
- Check fill level regularly. Replace container when fill level is reached.

### 4. Final closure

- When full, insert tabs on cylinder closure into slots and press firmly.
- Remove container from bracket.

### 5. Disposal

Dispose of container according to facility policy. May be autoclaved or incinerated.



Mettre au rebut le contenant selon les directives de l'établissement. Peut être stérilisé à l'autoclave ou incinéré.